Stratacel®

apósito avanzado para el cuidado de tratamientos fraccionados

Un avance innovador en el cuidado post-procedimiento

Cicatrización más rápida y una reducción significativa del tiempo de recuperación.



Reduce el tiempo de recuperación a la mitad[1]



es.stratacel.com

Heal Better™
Stratpharma
Iberia

Procedimientos de rejuvenecimiento

Los procedimientos fraccionados **lesionan la superficie de la piel** de forma punteada para estimular la producción de colágeno, lo que conduce a una piel más suave y de aspecto más joven.

Estos tratamientos **requieren un cuidado post-operatorio meticuloso** para asegurar el mejor resultado posible, además de acortar el tiempo de recuperación, reducir el riesgo de infección y hacer que el proceso sea lo más cómodo posible.

Los **efectos secundarios más comunes** son:
- Sensación de ardor y molestias
- Picor e inflamación de la piel
- Enrojecimiento de la piel
- Infecciones

El cuidado de la piel tras un procedimiento, es tan importante como el propio procedimiento para obtener el mejor resultado estético. Es esencial elegir un producto de cuidado post-procedimiento que cumpla con ciertos criterios.[2]

El producto ideal para el cuidado post-procedimiento

Los cuidados post-procedimiento **totalmente oclusivos**, como los **productos a base de vaselina (Aquaphor®)**, no son ideales porque **aumentan la sensación de calor.** Además, pueden promover la maceracion de la herida, la suavizacion y el deterioro de la piel, lo que **puede retrasar la cicatrización y favorecer el crecimiento bacteriano.[1]**

Los ungüentos y las cremas hidratantes no son ideales, ya que **no crean un entorno óptimo de cicatrización de la herida** necesario para obtener el mejor resultado tras el procedimiento.[1]



Un producto de cuidado ideal debe cumplir los siguientes requisitos:[1,2]

- Transparente, permitiendo monitorizar el progreso de la cicatrización
- Semipermeable
- Fácil de aplicar en casa
- Proteger la piel
- Acelerar la cicatrización
- Reducir los efectos secundarios



Stratacel®: Primera línea de cuidado post-procedimiento[1]

ACORTA EL TIEMPO DE RECUPERACIÓN:
Al aplicar Stratacel inmediatamente después del procedimiento, **el tiempo de recuperación se reduce a la mitad** en comparación con los productos de cuidado estándar.

REJUVENECER CON COMODIDAD:
Stratacel favorece una **cicatrización más rápida** y **reduce los síntomas agudos,** lo que contribuye a mejorar el **resultado visible global** del tratamiento y la satisfacción del paciente.

PRODUCTO SANITARIO DE CLASE IIA, APÓSITO PARA HERIDAS:
Stratacel se seca formando un **apósito de herida fino, flexible y de contacto completo** que **garantiza un contacto constante con la piel.**

ALIVIO SINTOMÁTICO:
Stratacel proporciona alivio sintomático del **picor, la sensación de ardor y las molestias, y reduce el enrojecimiento y la decoloración** asociados a la piel dañada.



Stratacel® para su uso inmediatamente después de:

Procedimientos médicos:
- Criocirugía (queratosis actínica)
- Post terapia con 5-FU
- Tatuaje médico (p. ej., post reconstrucción mamaria)
- Enfermedades inflamatorias de la piel y reacciones cutáneas
- Quemaduras de 1º y 2º grado (con epidermis)

Procedimientos cosméticos:
- Procedimientos con láser (fraccionado)
- Peeling químico (superficial)
- Rejuvenecimiento vaginal
- Microdermoabrasión
- Radiofrecuencia
- Microblading
- Microneedling
- Terapia con plasma rico en plaquetas (PRP)
- Terapia de inducción de colágeno
- Eliminación de tatuajes (fraccional)
- Otros dispositivos fraccionados

Stratacel ha sido desarrollado con una consistencia especial para adherirse suavemente a la epidermis existente, lo que lo convierte en un apósito post-procedimiento ideal tras lesiones cutáneas fraccionadas.


Stratacel® frente a una crema a base de vaselina

Se realizó en Estados Unidos un **estudio aleatorizado de cara dividida** en 20 pacientes para evaluar la eficacia de Stratacel® **en comparación con el cuidado estándar (Aquaphor®, una pomada a base de vaselina)** en la reducción del tiempo de recuperación, la gravedad y la duración de las reacciones inflamatorias agudas tras microneedling con radiofrecuencia fraccionada.[1]

Stratacel reduce el tiempo de recuperación a la mitad



Inmediatamente después del procedimiento

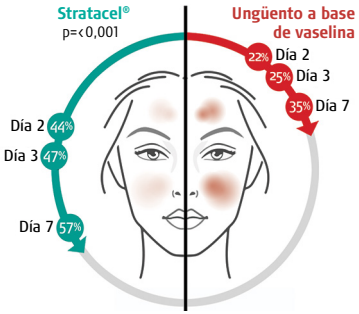


Reducción del eritema (enrojecimiento) (Mejora de la hemoglobina vs. el valor basal, medida mediante cámara Antera 3D)

Tras **2 días después del procedimiento y de aplicar Stratacel, el tiempo de recuperación se reduce significativamente en un 50%** en comparación con los productos a base de vaselina.

Stratacel mostró una reducción del 63% mayor del eritema en comparación con el producto a base de vaselina 7 dias despues del procedimiento.

Análisis de hemoglobina mediante cámara Antera 3D

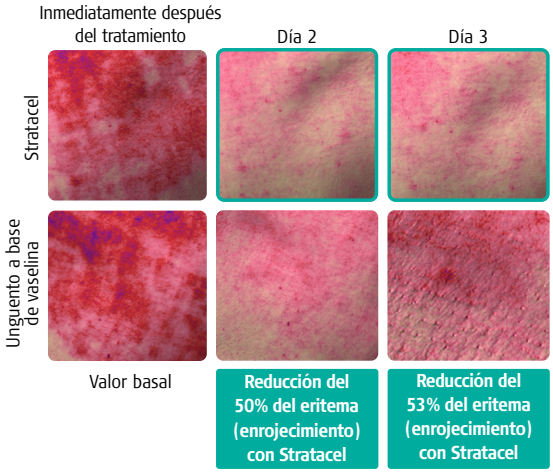

Resultados clínicos con Stratacel®: Antes y después

Rejuvenecimiento correctivo complejo de la piel – rostro[3]

Dr. Marini – SDC The Skin Doctors Center, Trieste, Italia



Antes del procedimiento | Post-procedimiento, inicio del tratamiento con Stratacel | Después de 9 días de tratamiento con Stratacel

Rejuvenecimiento con láser fraccionado – área perioral[4]

Dr. M. Sandhofer – Linz, Austria



Antes del procedimiento | Post-procedimiento, inicio del tratamiento con Stratacel | Después de 10 días de tratamiento con Stratacel

Rejuvenecimiento con láser – cicatrices de acné[4]


Dr. M. Sandhofer – Linz, Austria



Antes del procedimiento | Post-procedimiento, inicio del tratamiento con Stratacel | Después de 7 días de tratamiento con Stratacel

Rejuvenecimiento con láser fraccionado – área periorbital[3]

Dr. Marini – SDC The Skin Doctors Center, Trieste, Italia

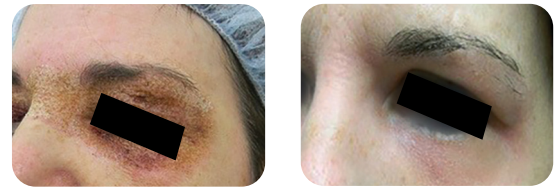

Post-procedimiento, inicio del tratamiento con Stratacel | Después de 7 días de tratamiento con Stratacel

Modo de empleo



1. Asegúrese de que la piel afectada o la herida superficial esté limpia. Seque suavemente la mayor cantidad posible de exudado o líquido de la herida antes de aplicar el gel.



2. Aplique **una capa muy fina** de Stratacel directamente sobre la zona afectada y deje que el gel se seque. Cuando se aplica correctamente, Stratacel debe secarse en **5-6 minutos.** Para reducir el riesgo de reacciones cutáneas, Stratacel debe aplicarse como la primera capa de contacto.



3. Si tarda más en secarse, probablemente ha aplicado una cantidad excesiva. Retire suavemente el exceso con un pañuelo limpio o una gasa y deje que el proceso de secado continúe. Si se utiliza un apósito secundario, no es necesario el secado.



4. **Una vez seco, Stratacel puede cubrirse con un protector solar físico, cosméticos o ropa.** Si la piel se siente seca o tirante, puede reaplicar Stratacel según sea necesario.

Para obtener mejores resultados

- Stratacel **puede almacenarse en el refrigerador** antes de su aplicación para un alivio más rápido de la sensación de ardor que puede producirse tras el procedimiento.
- Stratacel **no necesita ser frotado ni masajeado,** ya que no penetra en la piel y esto no mejora su efecto.
- Stratacel también puede utilizarse junto con otros tratamientos complementarios para mejorar los resultados generales.
- Stratacel **no debe aplicarse sobre medicamentos tópicos** salvo indicación médica.
- Para obtener los mejores resultados, Stratacel debe mantenerse en **contacto continuo con la piel** (24 horas al día / 7 días a la semana).

Indicaciones adicionales

- Stratacel **debe aplicarse una vez al día, o dos veces al día** en zonas expuestas, o según sea necesario para **mantener el contacto** con la superficie afectada, o según indicación médica.
- Stratacel se recomienda como **tratamiento inmediato post-procedimiento** y debe continuarse hasta que la piel se haya recuperado por completo.
- En el caso de los tratamientos de rejuvenecimiento cutáneo y los procedimientos ablativos, se recomienda continuar con el uso durante **un mínimo de 30 días** o hasta que no se observen más mejoras.
- **No son necesarios hidratantes, lociones, etc.** Stratacel puede reaplicarse con mayor frecuencia para evitar la sensación de sequedad o tirantez, ya que previene la evaporación de agua a través de la piel dañada que puede causar esta sensación. Las cremas hidratantes pueden aplicarse después de que Stratacel se haya secado para mantener el contacto de primera capa con la piel. A diferencia de Stratacel, las cremas hidratantes pueden causar irritación. La aplicación de cualquier producto adicional sobre Stratacel puede reducir su eficacia.

¿Cuánto Stratacel® necesito?



Stratacel es una formulación avanzada que requiere una **cantidad significativamente menor** de producto por aplicación en comparación con las cremas o geles hidratantes habituales.

Stratacel 10g
Contiene suficiente gel para tratar un área de 6 × 6 cm dos veces al día durante más de 60 días.



C.N.: 192570.1

Stratacel 20g
Contiene suficiente gel para tratar un área de 6 × 12 cm dos veces al día durante más de 60 días.



C.N.: 192571.8

Stratacel®

apósito avanzado para el cuidado de tratamientos fraccionados

Stratacel®: Cicatrización más rápida y reducción significativa del tiempo de recuperación tras procedimientos fraccionados

Aplicación inmediata tras procedimientos fraccionados. Una vez seco, puede cubrirse con protector solar o cosméticos

Stratacel es un apósito para heridas que promueve un entorno húmedo de cicatrización, lo que conduce a:

- Cicatrización más rápida
- Reducción de la inflamación, el enrojecimiento y la sensación de calor

Semioclusivo y permeable a los gases: permite que la piel respire y se mantenga hidratada

Protege la piel comprometida frente a la invasión química y microbiana

Cómodo y fácil de aplicar en casa



Para consultas o pedidos:
Email: es.pedidos@stratpharma.com | Teléfono: +34 659 100 762

www.es.stratacel.com

Precaución: Lea siempre la etiqueta, utilice únicamente según las indicaciones. Solo para uso externo. Consulte las instrucciones de uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información, consulte el Prospecto de Información para el Paciente (PIL).
Ingredientes: Polidimetilsiloxanos, siloxanos, silicones alquilmetílicos.

Referencias: 1. Gold, M., et al. (2019). *Journal of Cosmetic Dermatology,* 18(2), pp. 524-529. 2. Marini, L. (2017). *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology,* 32(1), pp. 113-116. 3. Cortesía de Leonardo Marini, MD – SDC The Skin Doctors Center, Trieste, Italia, 2017. 4. Sandhofer, M., Schauer, P. (2012). *Skinmed,* 10(6), pp. S1-S7.

Fabricado por: Stratpharma AG, Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basilea, Suiza
Stratpharma Iberia SL: Pº de la Castellana, 216 - 8ª Planta (Torre Realia), 28046 Madrid, España

CE 2797 Producto sanitario de Clase IIa
Registrado por la FDA

Heal Better™ Stratpharma Iberia

SC-ES-026-3-10626