Stratacel®

pansament inovator pentru
proceduri fracționale

Un progres în îngrijirea post-procedură

Vindecare mai rapidă și o reducere semnificativă a timpului de recuperare



Reduce timpul de recuperare la jumătate[1]



Stratpharma
Switzerland

ro.stratacel.com

Proceduri de rejuvenare

Procedurile fracționate **lezează suprafața pielii** într-un mod punctat pentru a stimula producția de colagen, ceea ce duce la o piele mai netedă, cu aspect mai tânăr.

Aceste tratamente **necesită o îngrijire ulterioară meticuloasă** pentru a asigura cel mai bun rezultat posibil, pe lângă scurtarea timpului de vindecare, reducerea riscului de infecție și un tratament cât mai plăcut.

Cele mai **frecvente efecte secundare** sunt:

- Senzație de arsură și disconfort
- Mâncărimi și umflături ale pielii
- Piele înroșită
- Infecții

Îngrijirea pielii după procedură este la fel de importantă ca și procedura în sine, pentru a obține cel mai bun rezultat estetic. Este esențial să alegeți un produs de îngrijire post-procedură care să îndeplinească anumite criterii.[2]

Produsul ideal de îngrijire post-procedură

Îngrijirea post-procedură **complet ocluzivă**, cum ar fi **produsele pe bază de vaselină, nu este ideală** deoarece **crește senzația de căldură**. În plus, acestea pot provoca macerare, o înmuiere și o descompunere a pielii, ceea ce poate **întârzia vindecarea și favoriza dezvoltarea bacteriilor**.[1]

Unguentele și cremele hidratante nu sunt ideale, deoarece **nu creează un mediu optim de vindecare a plăgii,** care este necesar pentru a obține cel mai bun rezultat post-procedură.[1]



Un produs de îngrijire ideal ar trebui să îndeplinească următoarele cerințe:[1,2]

- Transparent, permițând monitorizarea progresului vindecării
- Semi-permeabil
- Ușor de aplicat la domiciliu
- Protejează pielea
- Accelerează vindecarea
- Reduce efectele secundare

Stratacel®: Prima linie de îngrijire post-procedură[1]

SCURTEAZĂ TIMPUL DE RECUPERARE:
Prin aplicarea Stratacel după doar 2 zile post-procedură, **timpul de recuperare este redus la jumătate** în comparație cu produsele de îngrijire standard.

REJUVENARE CONFORTABILĂ:
Stratacel favorizează o **vindecare mai rapidă** și **reduce simptomele acute**, ceea ce duce la îmbunătățirea **rezultatului general vizibil al tratamentului** și la satisfacția pacientului.

DISPOZITIV MEDICAL CLASA IIa CU MARCAJ CE, PANSAMENT PENTRU RĂNI:
Stratacel se usucă pentru a forma o peliculă subțire, flexibilă, **cu contact complet,** care **asigură o acoperire constantă cu pielea.**



AMELIORAREA SIMPTOMATICĂ:
Stratacel oferă o ameliorare simptomatică a **mâncărimilor, a senzației de arsură și a disconfortului și reduce roșeața și decolorarea** asociate cu pielea deteriorată.

Stratacel® pentru utilizare imediat post:

Proceduri medicale:

- Criochirurgie (keratoză actinică)
- Terapie post 5-FU
- Tatuaj medical (de exemplu, post reconstrucție mamară
- Boli și reacții inflamatorii ale pielii
- Arsuri de gradul 1 și 2 (cu epidermă)

Proceduri cosmetice:

- Proceduri cu laser (fracționat)
- Peeling chimic (superficial)
- Rejuvenare vaginală
- Microdermabraziune
- Radiofrecvență
- Microblading
- Microneedling
- Plasmă bogată în trombocite (PRP)
- Terapia de inducere a colagenului
- Îndepărtarea tatuajelor (fracționat)
- Alte dispozitive fracționate

Stratacel a fost dezvoltat cu o consistență specială pentru a adera ușor la epiderma existentă, ceea ce îl face un pansament ideal după o intervenție chirurgicală sau după leziuni cutanate fracționate.


Stratacel® vs. produs pe bază de vaselină

În Statele Unite ale Americii a fost efectuat un **studiu randomizat** pe 20 de pacienți, pentru a **evalua eficacitatea Stratacel în comparație cu tratamentul standard, un unguent pe bază de vaselină**, în reducerea timpului de recuperare, a severității și a duratei reacțiilor inflamatorii acute după microneedlingul prin radiofrecvență fracționată.[1]

Stratacel® reduce la jumătate timpul de recuperare



Imediat după procedură

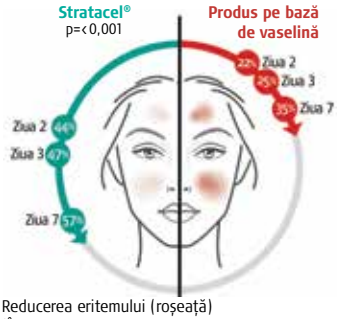

Reducerea eritemului (roșeață)
(Îmbunătățirea hemoglobinei față de valoarea inițială, măsurată prin intermediul camerei Antera 3D)

După doar **2 zile de la aplicarea Stratacel, timpul de recuperare este redus semnificativ cu 50%** în comparație cu produsele pe bază de vaselină.

Stratacel a arătat o reducere cu 63% mai mare a eritemului (roșeață) în comparație cu produsul pe bază de vaselină în ziua 7 după procedură.

Antera 3D Camera de analiză a hemoglobinei



Rezultate clinice cu Stratacel®: Înainte și după

Resurfacing corectiv complex - Față[3]

Dr. Marini - SDC The Skin Doctors Center, Trieste, Italy



Înainte de procedură | Post-procedură, începerea tratamentului cu Stratacel | După 9 zile de tratament cu Stratacel

Resurfacing cu laser fracționat - zona periorală[4]

Dr. M. Sandhofer - Linz, Austria



Înainte de procedură | Post-procedură, începerea tratamentului cu Stratacel | După 10 zile de tratament cu Stratacel

Resurfacing cu laser - Cicatrici cauzate de acnee[4]

Dr. M. Sandhofer - Linz, Austria



Înainte de procedură | Post-procedură începerea treatmentului cu Stratacel | După 7 zile de tratament cu Stratacel

Resurfacing cu laser fracționat - zona periorbitală[3]

Dr. Marini - SDC The Skin Doctors Center, Trieste, Italy



Post-procedură, începerea tratamentului cu Stratacel | După 7 zile de tratament cu Stratacel

Indicații de utilizare



1. Asigurați-vă că pielea afectată sau rana superficială este curată. Tamponați cu grijă cât mai mult exudat în exces sau lichid de rană din zonă înainte de aplicarea gelului.



2. Aplicați un **strat foarte subțire** de Stratacel direct pe zona afectată și lăsați gelul să se usuce. Dacă este aplicat corect, Stratacel ar trebui să se usuce în **5-6 minute.** Pentru a reduce riscul de reacții cutanate, Stratacel trebuie aplicat ca prim strat de contact.



3. Dacă durează mai mult să se usuce, probabil că ați aplicat prea mult. Îndepărtați ușor excesul cu un șervețel sau tifon curat și lăsați procesul de uscare să continue. Dacă se utilizează un pansament secundar, nu este necesară uscarea.



4. **Odată uscat, Stratacel poate fi acoperit cu o cremă de protecție solară fizică, produse cosmetice sau îmbrăcăminte.** În cazul în care vă simțiți pielea uscată sau tensionată, puteți reaplica Stratacel, după caz.

Pentru rezultate optime

- Stratacel **poate fi păstrat în frigider** înainte de aplicare pentru ameliorarea mai rapidă a senzației de arsură care poate apărea după procedură.
- Stratacel **nu trebuie fricționat sau masat**, deoarece nu pătrunde în piele și nu își va spori efectul.
- Stratacel poate fi, de asemenea, utilizat împreună cu alte tratamente adjuvante pentru a îmbunătăți rezultatele generale.
- Stratacel **nu trebuie aplicat peste medicamente topice** decât dacă este recomandat de medic.
- Pentru cele mai bune rezultate, Stratacel trebuie să fie în **contact continuu** cu pielea (24 de ore pe zi/7 zile pe săptămână).

Indicații suplimentare

- Stratacel trebuie aplicat **o dată pe zi sau de două ori pe zi** pe zonele expuse sau după cum este necesar pentru a **menține contactul** cu suprafața afectată, sau conform recomandării medicului.
- Stratacel este recomandat ca tratament **imediat post-procedură** și trebuie continuat până la recuperarea completă a pielii.
- Pentru procedurile de resurfacing și ablative, se recomandă utilizarea continuă pentru un **tratament de minim 30 de zile** sau până când nu se mai observă nicio îmbunătățire.
- **Nu sunt necesare creme hidratante, loțiuni etc.** Stratacel poate fi reaplicat mai des pentru a evita senzația de piele uscată și de piele întinsă, deoarece Stratacel împiedică evaporarea apei prin pielea deteriorată care poate cauza această senzație.

  Alternativ, se poate aplica o cremă hidratantă după ce Stratacel se usucă pentru a menține primul contact cu pielea. Spre deosebire de Stratacel, cremele hidratante pot provoca iritații, iar unele dintre ele sunt complet ocluzive (înseamnă că nu permit schimbul de gaze prin piele). Adăugarea oricărui produs suplimentar peste Stratacel poate reduce eficacitatea Stratacel.

Dimensiuni disponibile

Stratacel este o formulă avansată care presupune folosirea unei cantități mult mai mici de produs pentru fiecare aplicare decât cremele sau gelurile hidratante obișnuite.

Stratacel 10g
este suficient pentru a trata o suprafață de 6 x 6 cm, de două ori pe zi, timp de peste 60 de zile.



Stratacel 20g
este suficient pentru a trata o suprafață de 6 x 12 cm, de două ori pe zi, timp de peste 60 de zile.



Stratacel®

pansament inovator pentru proceduri fracționale

Stratacel® - Vindecare mai rapidă și reducere semnificativă a timpului de recuperare după procedurile fracționate

Aplicarea imediată post-proceduri fracționate. După ce se usucă, poate fi acoperit cu cremă de protecție solară sau produse cosmetice.

Stratacel este un pansament pentru plăgi care promovează o mediu umed de vindecare care duce la:

- Vindecare mai rapidă,
- Reduce inflamația, roșeața și senzația de căldură.

Semi-ocluziv și permeabil la gaze: permite pielii să respire și să rămână hidratată.

Protejează pielea compromisă împotriva invaziei chimice și microbiene.

Convenabil și ușor de aplicat la domiciliu.



Dacă aveți întrebări despre Stratacel sau despre alte produse Stratpharma, contactați-ne la sediul nostru central din Basel, Elveția: +41 061 691 691 12 80 sau inquiries@stratpharma.com

ro.stratacel.com

Atenție: Citiți întotdeauna prospectul. Numai pentru uz extern. Consultați instrucțiunile de utilizare. Utilizați numai conform instrucțiunilor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pentru instrucțiuni suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul cu informații pentru pacienți (PIL).
Ingrediente: Polidimetilsiloxani, siloxani, siliconi alchilmetilici.
Referințe: 1. Gold, M., et al. (2019). *J of cosmetic dermatology,* 18(2), pp. 524-529. 2. Marini, L. (2017). *J of the European Academy of Dermatology and Venereology,* 32(1), pp. 113-116. 3. Prin amabilitatea lui Leonardo Marini, MD - SDC The Skin Doctors Center Trieste, Italia, 2017. 4. Sandhofer, M., Schauer, P. (2012). *Skinmed,* 10(6), pp. S1-S7.
Fabricat de: Stratpharma AG, Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basel, Elveția

CE 2797 Stratacel este un dispozitiv medical de clasa IIa, cu marcaj CE pentru Europa, înregistrat TGA și FDA.

Stratpharma Switzerland

SC-RO-026-1-0324